


Teknisk brukerveiledning for Hympavzi

Klargjøringstrinn

Trinn 1 – Forberedelser

- **Ta pennen ut** av esken og **sjekk pennen** for synlige skader som sprekker eller lekkasjer. Hvis skadet, **kast (kasser)** pennen
- **Vask og tørk** hendene.
- **Ikke fjern hetten før du er klar til å injisere.**
- **Ikke bruk** pennen hvis:
 - den har vært oppbevart i direkte lys, (men akseptabelt med eksponering for romlys under doseklargjøring og injeksjon)
 - den har vært fryst eller tint, eller vært ute av kjøleskapet i mer enn 7 dager
- Pennen **skal ikke** ristes.
- **Merk:** For å få en mer behagelig injeksjon, la pennen bli romtemperert i esken, beskyttet mot direkte sollys, i ca. 15 til 30 minutter.

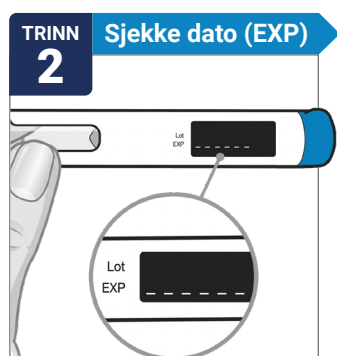


Sjekk utløpsdatoen (EXP). Skal **ikke** brukes hvis utløpsdatoen har passert.




Se nøye på legemiddelet gjennom vinduet på pennen. Legemiddelet skal være klart og fargeløst til lysegult. **Ikke** bruk pennen hvis legemiddelet er uklart, mørkegult eller inneholder flak eller partikler.

Merk: Det er normalt å se luftbobler i vinduet.

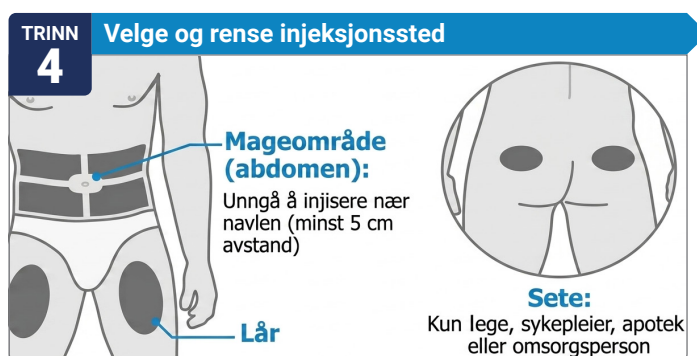

Velg et injeksjonssted på magen (abdomen) eller låret. Bytt injeksjonssted hver gang du gir deg selv en injeksjon. Rens injeksjonsstedet med med såpe og vann eller en spritserviett. La injeksjonsstedet få tørke.

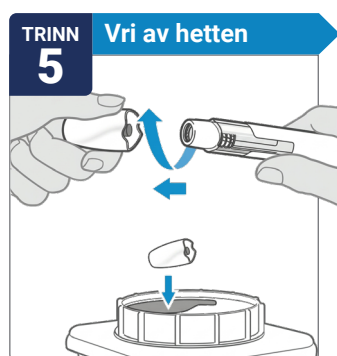

Vri og trekk av hetten. Legg hetten i en kanylebøtte umiddelbart etterpå.

Merk: Det er vanlig å se noen dråper legemiddel på kanylepissisen.



Les pakningsvedlegget som ligger i pakningen til Hymavzi før bruk. Teknisk veiledning basert på informasjon i pakningsvedlegget til Hymavzi


Injeksjonstrinn

TRINN
6

Sjekk vindu
Trykk bestemt nedover

Hold trykket

Tell

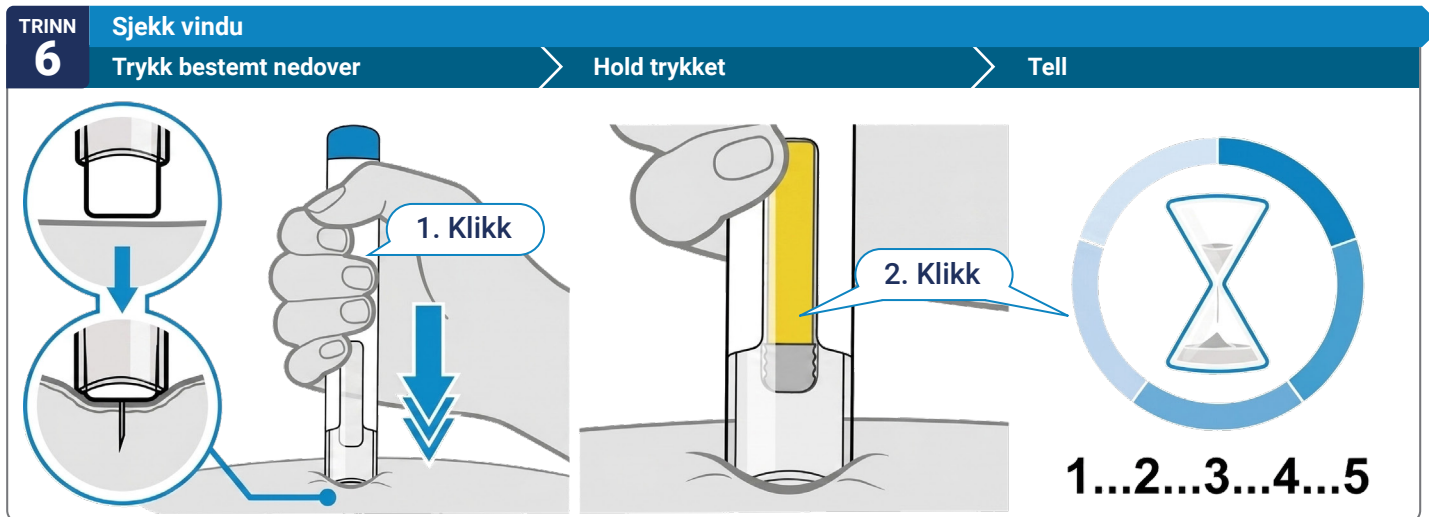

1. Klikk

2. Klikk

1...2...3...4...5

Trykk pennen **bestemt nedover** mot huden i en 90° vinkel, og **hold trykket** til injeksjonen er fullført (trinn 7). Du vil høre det **første klikket** når injeksjonen starter.

Hold trykket på pennen mot huden mens det gule feltet beveger seg langs vinduet. Du vil høre det **andre klikket** når injeksjonen er **nesten** fullført.


Tell sakte til fem etter at du hører det andre klikket for å være sikker på at du får en full dose.

Ikke fjern pennen fra huden før du har telt sakte til fem etter at du hører det andre klikket, og til den gule markøren fyller vinduet helt.

Merk: Hvis du ikke hører et klikk når du trykker pennen mot huden, kan du prøve å trykke litt hardere. Hvis du fortsatt ikke kan starte injeksjonen, kan du finne frem en ny Hymvapzi ferdigfylt penn.

TRINN
7


Ta ut pennen

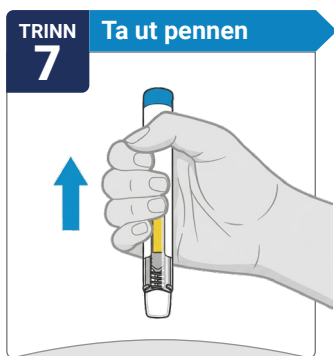

Ta ut pennen fra huden. Hvis du ser en liten dråpe legemiddel på huden, må du vente litt lenger før du fjerner pennen ved neste injeksjon.

TRINN
8

Sjekk vindu

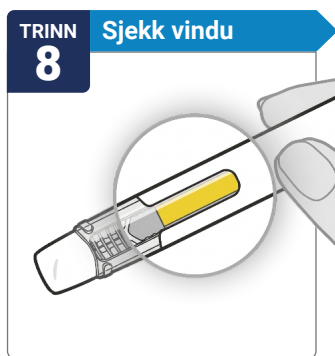

Sjekk vinduet for å forsikre deg om at alt legemiddelet er injisert.

Hvis den gule streken ikke er i den posisjonen som vises, betyr det at du ikke har fått en full dose. Ring lege, sykepleier eller apotek for å få hjelp.

Ikke injiser en ny dose.

TRINN
9

Etterbehandling



Trykk lett på injeksjonsstedet noen sekunder med en ren bomullsdott eller gasbind hvis du ser det kommer en bloddråpe. **Ikke** gni på området.

TRINN
10

Kassering



Legg den brukte pennen i en kanylebøtte **Ikke** kast (kasser) penner i husholdningsavfallet.