

▼ **BENEPALI®**

KORT BRUKERVEILEDNING

**Benepali®
Ferdigfylt sprøyte**

**Benepali®**

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning, se www.legemiddelverket.no/pasientmelding.

(PFSyringe) NO v 2.0
05 / 2017

→ A. Før du begynner

Finn frem utstyret ditt

Finn en ren, godt opplyst overflate og legg frem alt du trenger:



Ikke inkludert i pakningen:



1 stk. spritserviett




Bomullsdott eller kompress



Avfallsbeholder for skarpe gjenstander

En ny Benepali® ferdigfylt sprøyte
En ferdigfylt sprøyte til engangsbruk
Ikke rist den ferdigfylte sprøyten.

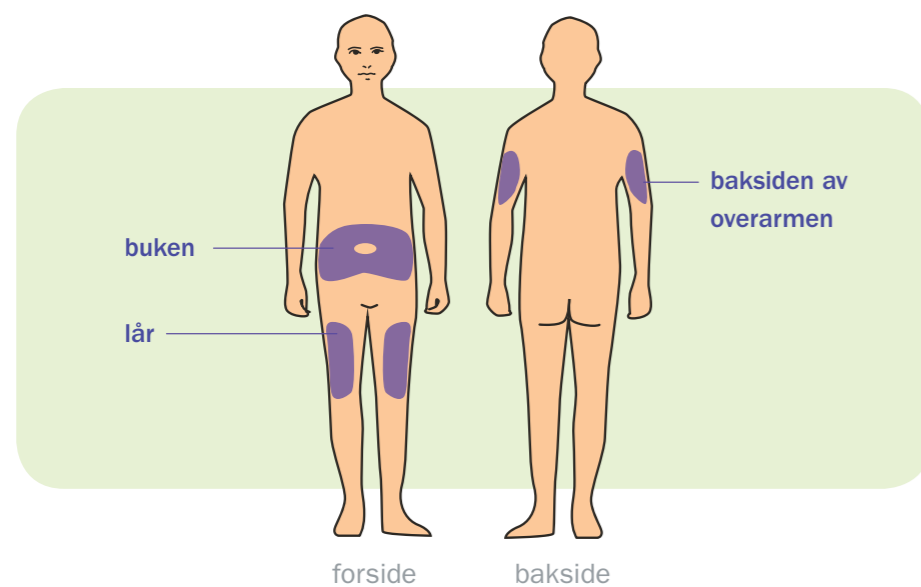

1. Sjekk den ferdigfylte sprøyten:

Sjekk utløpsdatoen på sprøyten etikett.

Ikke bruk den ferdigfylte sprøyten etter utløpsdatoen.

Ikke bruk den ferdigfylte sprøyten hvis den har falt ned på et hardt underlag. Delene i den ferdigfylte sprøyten kan være ødelagt.

Ikke bruk den ferdigfylte sprøyten dersom kanylehetten mangler eller ikke er godt festet.

2. Undersøk legemidlet:

Se på legemidlet i den ferdigfylte sprøyten.

Legemidlet bør være klart eller lett blakket, fargeløst eller svakt gult, og kan inneholde små, hvite eller nesten gjennomsiktige proteinpartikler.

Ikke bruk legemidlet dersom det er misfarget, uklart eller dersom det inneholder andre partikler enn de som er nevnt ovenfor.

3. La legemidlet romtempereres:

Vent 30 minutter

Ta én ferdigfylt sprøyte fra kjøleskapet og la den ligge i romtemperatur i minst 30 minutter før injeksjon.

Dette er viktig for å gjøre det enklere og mer behagelig å sette injeksjonen.

Ikke bruk varmekilder, som mikrobølgeovn eller varmt vann, til å varme opp Benepali®.

Ikke ta av kanylehetten før du er klar til å sette injeksjonen.



Vent i 30 minutter før du bruker legemidlet

4. Velg et injeksjonssted:

Benepali® ferdigfylt sprøyte er til subkutan injeksjon (dvs. injiseres under huden). Injeksjonen bør settes i låret, buken, eller på baksiden av overarmen (se bilde til venstre).

Bytt sted for hver injeksjon.

Dersom du setter injeksjonen i buken, skal du velge et sted som er minst 5 cm fra navlen.


Ikke sett injeksjonen på områder som er røde, harde, har blåmerker eller som er ømme.

Ikke sett injeksjonen på arr eller strekkmerker.

Dersom du har psoriasis, må du **ikke** sette injeksjonen på hevede, tykke, røde eller skjellede hudområder eller på skadet hud.


→ B. Injeksjonstrinn

Trinn 1:

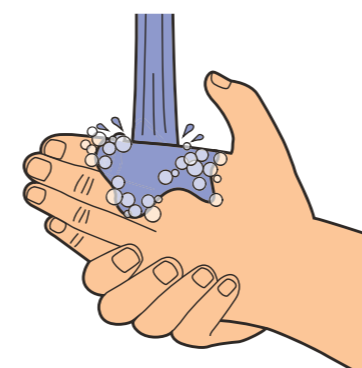

Vask hendene med såpe og vann.

Trinn 2:

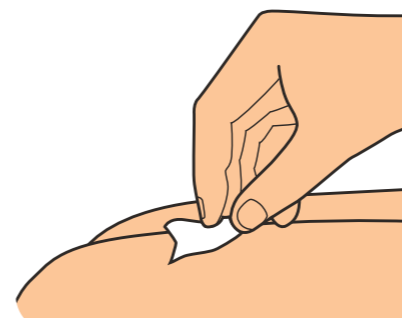


Vask huden på injeksjonsstedet med en spritserviett.

Se avsnittet "Velg et injeksjonssted" for veiledning vedrørende valg av injeksjonssted.

Ikke berør dette området igjen før du setter injeksjonen.

Trinn 3:

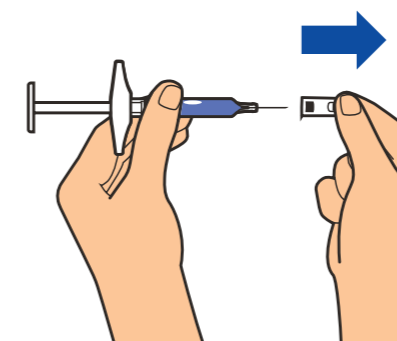

Trekk kanylehetten rett av og kast den i søppelbøtta eller i avfallsbeholderen for skarpe gjenstander.


Se avsnittet "Velg et injeksjonssted" for veiledning vedrørende valg av injeksjonssted.

Ikke vri eller bøy kanylehetten når du fjerner den, da dette kan skade kanylen.

Ikke berør stempelet når du fjerner kanylehetten.

Sett aldri hetten tilbake på kanylen igjen.


Trinn 4:

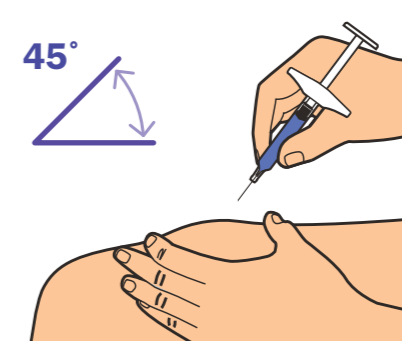

Klem forsiktig sammen en hudfold på det rengjorte injeksjonsstedet. Hold den ferdigfylte sprøyten 45 grader mot huden. Med en hurtig, målrettet bevegelse fører du kanylen helt inn i huden.


Du kan slippe hudfolden du har holdt i etter at kanylen er ført helt inn.

Trinn 5:

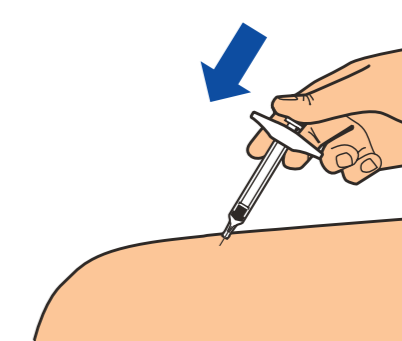

Trykk stempelet sakte inn for å injisere hele Benepali®-oppløsningen.

Trinn 6:

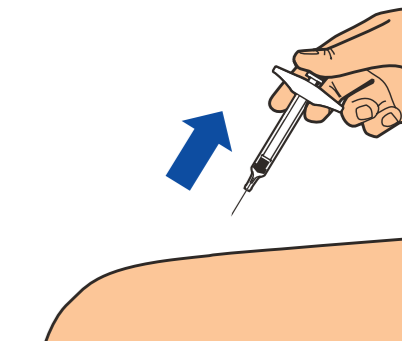

Når sprøyten er tom, må du trekke kanylen ut av huden med samme vinkel som den ble stukket inn.

Sett **aldri** hetten tilbake på kanylen igjen. Dette kan føre til stikkskade.

Kasting:



Kast hele sprøyten i en godkjent avfallsbeholder for skarpe gjenstander.

Rådfør deg med helsepersonell for instruksjoner om hvordan en full avfallsbeholder for skarpe gjenstander skal kastes. Avfallsbeholder for skarpe gjenstander fås kjøpt på det lokale apoteket.

Ikke kast avfallsbeholder for skarpe gjenstander i husholdningsavfallet.

Skal ikke resirkuleres.

Ikke bruk Benepali® ferdigfylt sprøyte flere ganger.

Oppbevar alltid beholderen utilgjengelig for barn.

→ C. Pleie av injeksjonssted

Trykk en bomullsdott eller kompress mot injeksjonsstedet dersom det blør.

Ikke gni injeksjonsstedet.

Ved behov kan injeksjonsstedet dekkes til med et plaster.



Spørsmål?

Snakk med lege eller sykepleier.

Sjekk bruksanvisningen.

Dersom lege eller sykepleier ikke kan svare på spørsmålene dine, se pakningsvedlegget for telefonnumre til lokale representanter med medisinsk informasjon og detaljer om hvordan bivirkninger skal rapporteres.

Les **bruksanvisningen** før du begynner å bruke Benepali® og hver gang du henter nye pakninger på apoteket. Det kan ha kommet nye opplysninger. Denne **korte brukerveiledningen** erstatter ikke disse instruksjonene.

Ikke forsøk å sette injeksjonen på deg selv med mindre lege eller sykepleier har vist deg hvordan du skal sette injeksjonen.

(PFSyringe) NO v 2.0
05 / 2017

