




## Adrenalinpenn til akutt behandling av anafylaksi

# Emerade adrenalinpenn ved anafylaksi

Emerade er en adrenalinpenn til akutt behandling av anafylaksi (allergisk sjokk). Man kan få anafylaksi av insektsstikk, matvarer eller legemidler. Det kan også bli utløst av anstrengelser eller av ukjente årsaker. Emerade motvirker symptomene ved anafylaksi.

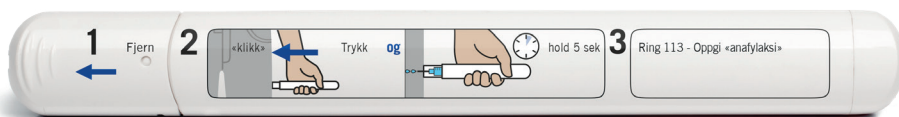

1. Fjern lokket
2. Plasser Emerade mot utsiden av låret i 90° vinkel. Trykk ordentlig slik at nålbeskyttelsen trykkes inn. Du hører et klikk når Emerade er aktivert og injeksjonen går inn i låret.  
**og**  
Hold Emerade helt inntrykket mot låret i 5 sekunder. Masser injeksjonsstedet lett i etterkant.
3. Ring 113, be om ambulanse og oppgi "anafylaksi" selv om du begynner å føle deg bedre.

Når du venter på ambulansen bør du ligge flatt, med føttene høyt. Dersom dette gjør deg andpusten kan du sette deg opp. Hvis du kan, søker du hjelp umiddelbart etter du har administrert din Emerade. Be noen bli hos deg til ambulansen kommer.



Se instruksjonsvideoen og les mer om anafylaksi på [emerade.com/no](http://emerade.com/no).

## Når du skal bruke Emerade?

Symptomer på en akutt allergisk reaksjon kan melde seg noen minutter etter kontakt med det allergifremkallende stoffet.

Symptomer:

- Kløe, spesielt under føttene, i hendene eller i hodet.
- Stikkende fornemmelse i munnen.
- Opphovning i munnen og halsen, på leppene og øynene.
- Kløe, rødming eller elveblest hvor som helst på kroppen.
- Svimmelhet, angst, kaldsvetting.
- Magesmerter, uvelhet og oppkast.
- Åndenød eller astmasymptomer.
- Plutselig svakhet, blodtrykksfall, bevisstløshet.
- Forvirring eller bevissthetstap.

**Kritiske symptomer:** Det er vanskelig å puste, munnen og svelget hovner opp, du blir plutselig trett og svimmel, eller du føler deg stadig dårligere. Skulle du få disse symptomene, injiser omgående adrenalin. Ring 113 og be om ambulanse.

Adrenalin motvirker blodtrykksfallet, stimulerer hjertet og bedrer åndingen. Ha alltid med deg Emerade hvis du risikerer å bli utsatt for stoffer du er allergisk mot.

## Nø! ikke med å bruke Emerade

Bruk Emerade omgående ved tegn eller symptomer på en akutt allergisk reaksjon. Følg de instruksene legen din gir.

Nø! ikke med å bruke din Emerade, selv om du ikke er sikker på om du har anafylaksi. Emerade kan redde livet ditt.

Emerade inneholder én dose og kan ikke gjenbrukes.

Det er viktig at du leser pakningsvedlegget, spesielt advarsler og forsiktighetsregler.

## Hvordan man kontrollerer om pennen din har blitt aktivert

Etter å ha brukt Emerade kan du forsikre deg om at adrenalinpennen din har blitt aktivert.

Dersom nålbeskyttelsen ikke er forlenget har ikke Emerade blitt aktivert.



Ubrukt Emerade (før aktivering) har nålbeskyttelsen i normal posisjon.



Emerade som har blitt aktivert har en forlenget nålbeskyttelse.

Pilen på etiketten angir hvor etiketten kan løftes for å vise inspeksjonsvinduet.

Dersom inspeksjonsvinduet viser klar væske har ikke dosen blitt administrert. En Emerade som har blitt aktivert, og har levert adrenalindosen, vil vise et farget stempel i inspeksjonsvinduet.



Gult stempel i Emerade 150 mikrogram

Grønt stempel i Emerade 300 mikrogram

Blått stempel i Emerade 500 mikrogram

Dersom injeksjonen ikke lykkes bør du bruke en penn nummer to umiddelbart.

## Ny dose etter 5 til 15 minutter

Noen ganger rekker det ikke med én dose for helt å stanse en akutt allergisk reaksjon. Legen din kan derfor anbefale at injeksjonen gjentas etter 5–15 minutter med en ny Emerade. I såfall anbefales det at du har med deg mer enn én penn.

## Anbefalt dose

Emerade finnes i tre doser: 150, 300 og 500 mikrogram. Legen din avgjør hva som er egnet dose for deg.

## Oppbevaring

Emerade tåler kulde, men la den ikke fryse (0°C). Oppbevares ved maksimalt 25°C.

Har du en treningspenn, oppbevar den på et annet sted enn Emerade.

Har du en treningspenn, oppbevar den på et annet sted enn Emerade.

Oppbevar Emerade i den beskyttende plastbeholderen som medfølger. Plastbeholderen som inneholder pennen/pennene kan oppbevares i ytterkartongen.

## Sjekk adrenalinet

Kontroller oppløsningen jevnlig ved å løse på etiketten over visningsåpningen på adrenalinpennen for å forsikre deg om at væsken er klar og fargeløs. Kasser og erstatt Emerade hvis væsken er misfarget eller inneholder utfelt materiale.

## Enkel

Emerade har et stort hull der nålen kommer ut og ikke noe hull i bakkant. Du vet instinktivt hvilken ende du skal trykke mot låret.

## Når du reiser med fly

Du kan ta med deg Emerade i håndbagasjen. For sikkerhets skyld kan du be legen din om å signere en reiseattest. Blanketten finnes på [emerade.com/no](http://emerade.com/no).



Beställ gratis fodral på [emerade.com/no](http://emerade.com/no).

## Medeca Pharma AB

Box 24005, 75024 Uppsala, Sverige  
[www.emerade.com/no](http://www.emerade.com/no)

Tel +46 18-25 85 30  
[www.medeca.se](http://www.medeca.se)

Fax +46 18-24 71 53  
[info@medeca.se](mailto:info@medeca.se)